

Getinge EDS8  
– för säker torkning och förvaring

GETINGE GROUP  
Passion for life



Ta kontroll över dina  
flexibla endoskop

---


# Säkerhet – för patienter, personal och för din budget

---

Mikroorganismer kan öka i antal till en farligt hög nivå inom ett par timmar. Om dina endoskop inte snabbt torkas och skyddas mot kontaminering måste de därför rengöras och desinfekteras på nytt. Med Getinge EDS8 tork- och förvaringsskåp säkerställer du att det alltid finns upp till åtta desinfekterade flexibla endoskop som är redo för omedelbar användning.

## Ser till att desinfekterade endoskop är mikrobiologiskt säkra och klara för användning

- HEPA-filtrerad luft cirkulerar kontinuerligt genom kanalerna inuti endoskopet och över dess utsida
- Oberoende tester visar att skåpen torkar instrumenten och förhindrar uppkomst av mikrober i upp till 7 dagar
- En alarmfunktion som säkrar ett tillräckligt luftflöde och de rätta förhållandena för säker förvaring av varje enskilt endoskop
- Horisontella hyllor förhindrar korskontamination mellan endoskoperna
- Uppfyller EN 16442:2014
- Testad med tre ytterligare bakteriestammar för extra hög säkerhet och i syfte att följa den franska läkemedelsmyndigheten ANSM:s säkerhetsrekommendationer

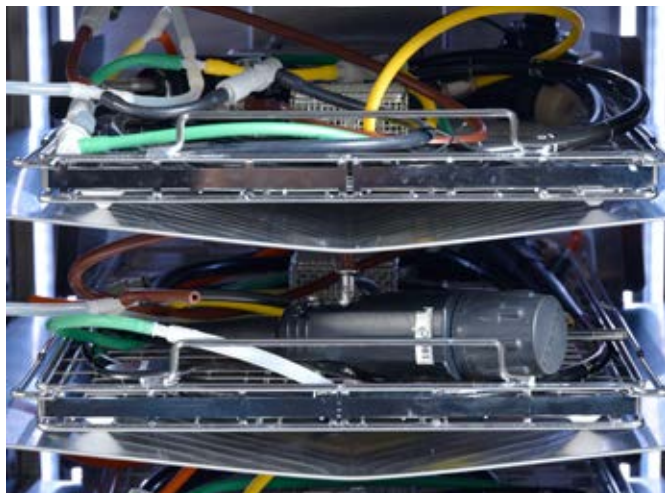

Horisontella hyllor



Getinge EDS8 tork- och förvaringsskåp



Fotpedal för bekväm manövrering med fria händer

#### Skyddar endoskoperna från skador

- Samma korg som används med Getinges AER-enheter, vilket minimerar hanteringen vid omlastning
- Beröringsfri dörr gör att användaren helt kan fokusera på hanteringen av endoskopet som lastas i/ur



Användarvänlig display

#### Effektiv hantering av endoskoplagret

- Användarvänlig grafisk display som visar namn, status och plats för alla endoskop i skåpet
- Säker dörr som endast kan öppnas av behörig personal (om säkerhetsfunktionen är aktiverad)
- Förberedd för att kopplas till T-DOC EndoTrace- och T-DOC 2000-systemen som gör det möjligt att hantera alla anläggningens endoskop



RFID-skanner för ökad säkerhet

#### Inbyggd spårbarhet för tork- och förvaringsfunktionen

- RFID-skanner gör det omöjligt att registrera fel ID för endoskop och användare
- Inbyggd skrivare för papperskopior av registrerade processer vid behov
- Anslutningen till T-DOC gör det möjligt att registrera kompletta processer för rengöring, inklusive tork- och förvaringsfasen samt endoskophanteringen i undersökningsrummet, och ger spårbarhet ända till patienten

# Därför att **alla patienter** förtjänar ett rent, desinfekterat endoskop – **varje gång**

---

**GETINGE GROUP**

Getinge Infection Control AB  
P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden  
Phone: +46 10 335 00 00  
info@getinge.com  
www.getinge.com

---

**MAQUET**  
GETINGE GROUP

**ARJOHUNTLEIGH**  
GETINGE GROUP

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

Getinge-koncernen är en ledande leverantör av innovativa lösningar för operationsalar, intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner inom life science. Med genuin passion för livet bygger vi in kvalitet och säkerhet i alla system. Vårt unika kunderbjudande återspeglar vårdsammanhanget och främjar effektivitet genom hela vårdkedjan. Utifrån direkta erfarenheter och i nära samarbete med kunden kan vi överträffa förväntningarna – och förbättra vardagen för människor, nu och i framtiden.